


Assistant guide

アシスタントガイド

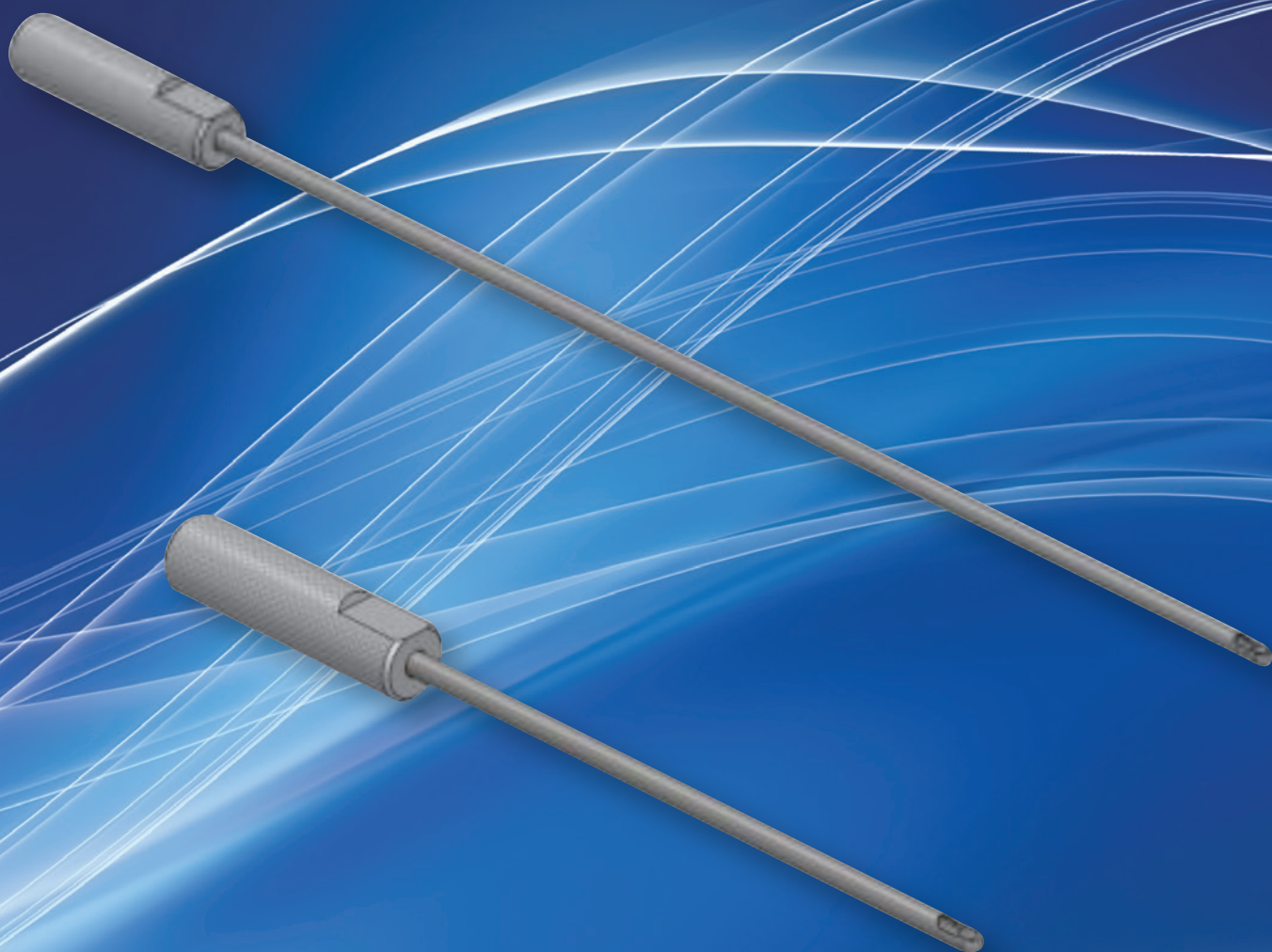

尿管ステントの挿入をアシストする
(回腸導管の尿管ステント / 女性の尿管ステント)

Assistant guide
MOVIE



Assistant guide short
MOVIE



Assistant guide アシスタントガイド

特 長

① 体腔内回腸導管造設時に尿管ステントを容易に挿入できる


アシスタントガイドは体腔内回腸導管造設術のときに、助手による尿管ステント挿入を容易にします。先端の独自の形状のため、回腸導管にやさしく挿入できます。また、ガイドワイヤーを2本、あるいは尿管ステント1本+ガイドワイヤー1本を同時に挿入することができるため、一度の操作で2本の尿管ステントを留置することができます。

② shortタイプは、女性の尿管ステント操作に有効

女性における尿管ステント留置あるいは交換のときに、膀胱内でガイドワイヤーや尿管ステントがたわみ、難渋することがあります。アシスタントガイドショートを使うことで、膀胱内でのたわみを防ぐことができます。また、先端の独自の形状のため、ガイドワイヤーや尿管ステントにしっかりとトルクがかかり、操作が容易になります。


徳島大学大学院
医歯薬学研究部
泌尿器科学分野 教授
金山博臣 先生

ロボット支援手術による体腔内回腸導管造設術（または輸入脚を有する代用膀胱造設術）では、尿管ステントを安全・円滑に留置することが大切です。我々の施設では、助手がアシスタントガイドを用いて尿管ステントを腸管内に通しています。アシスタントガイド先端の独自の形状によって、腸管内にやさしく、スムーズに挿入することができ、手術時間の短縮になります。

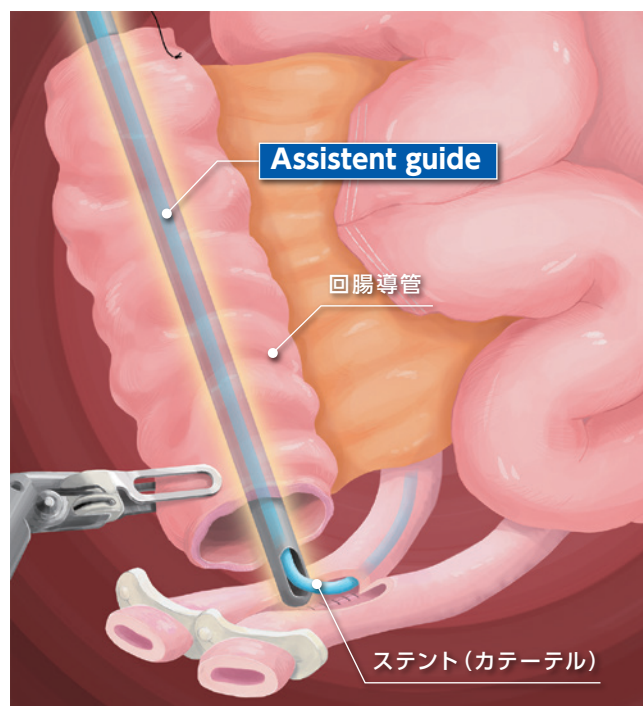


回腸導管造設術

寸 法

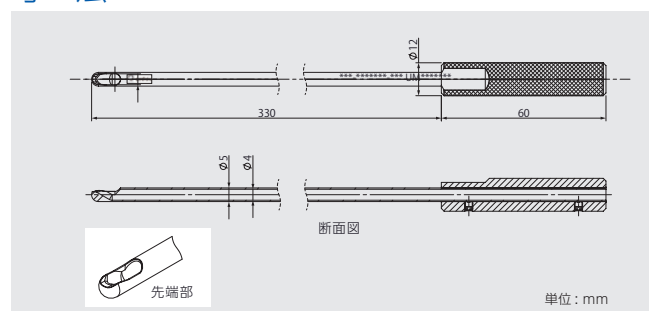

仕 様

製品名	サイズ	ガイド部	重さ	材質
Assistant guide	390mm×12mm	内径:φ4 外径:φ5	63g	ステンレス
Assistant guide short	160mm×12mm		51g	

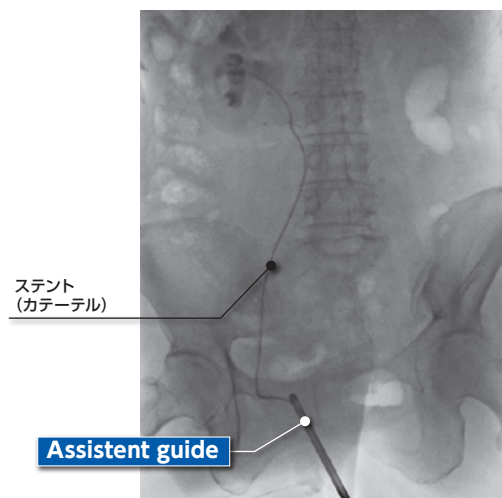

臨床画像

医療機器製造販売届出番号 26B2X10004002101

【意匠】出願番号：意願 2021-011519

【実用新案】出願番号：実願 2021-002064



〒601-8205 京都市南区久世殿城町 126 番地
TEL：075-932-4359 FAX：075-932-3932
URL：https://www.umihira.co.jp
E-mail：information@umihira.co.jp



販売店